


バイポーラクランプデバイス

バイセツプ

Bicep


広い把持部を持つバイセツプは、電気メス SHAPPER Ai の適切に制御されたクランプモードのジュールヒートフュージョン(ジュール熱融合)により、効果的で安全な凝固、シーリングを提供します。

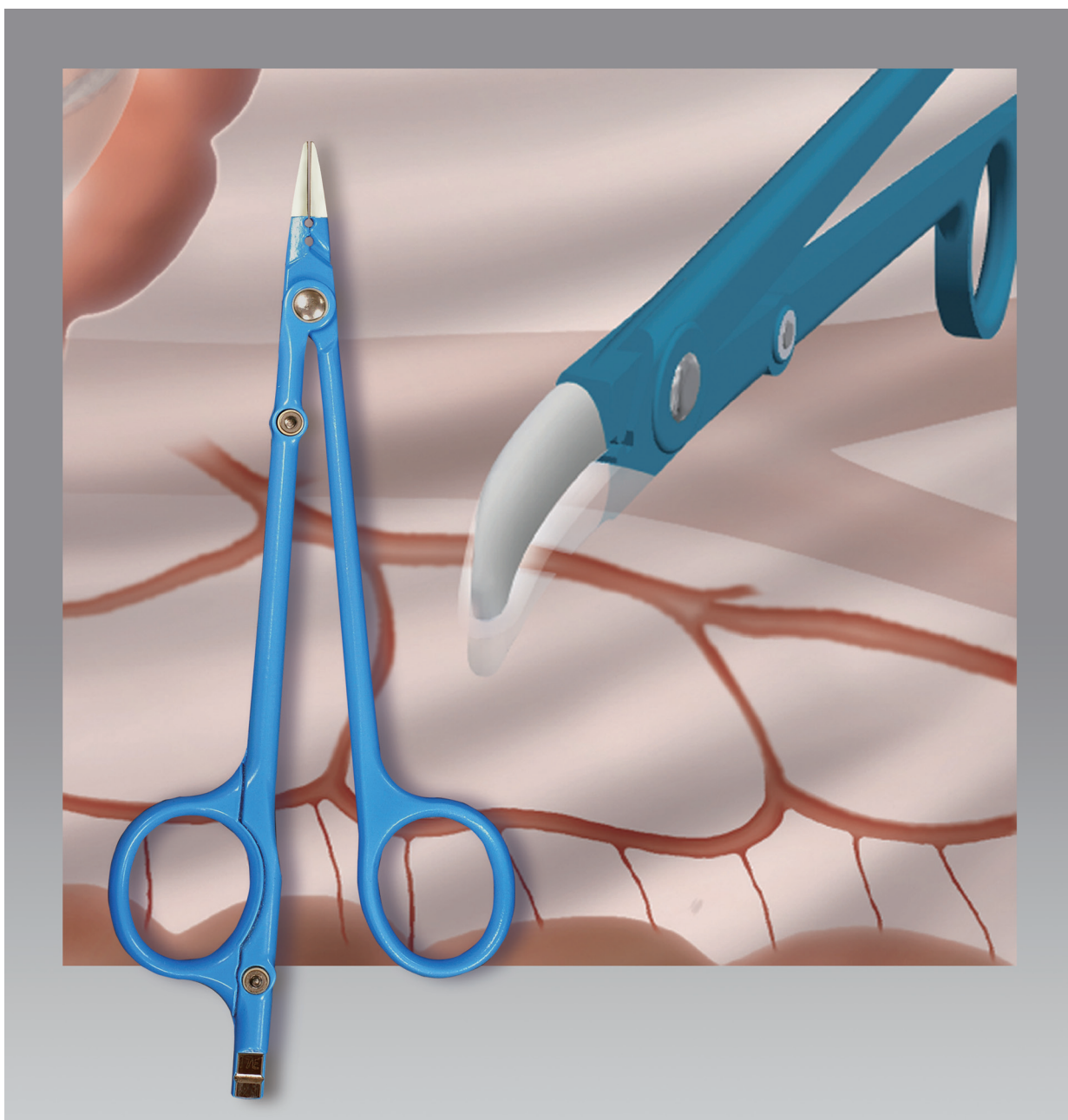


バイポーラクランプデバイス **バイセップ**

BICEP COAGULATION

BICEPは理想的な組織把持と電気メス SHAPPER Ai クランプモードの自動制御にて安全で効果的な凝固を提供します。

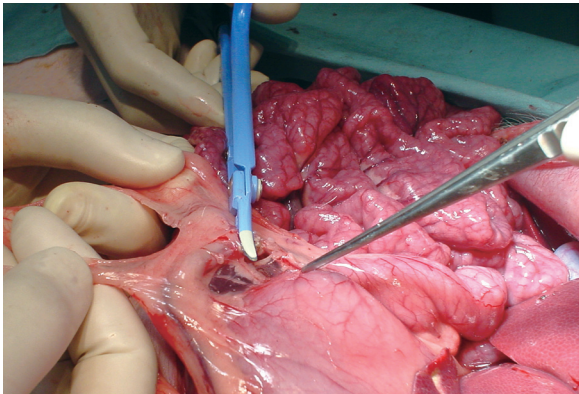

バイセップS-15を使用してブタ5mm血管を電気メス SHAPPER Ai のクランプモードシーリング。

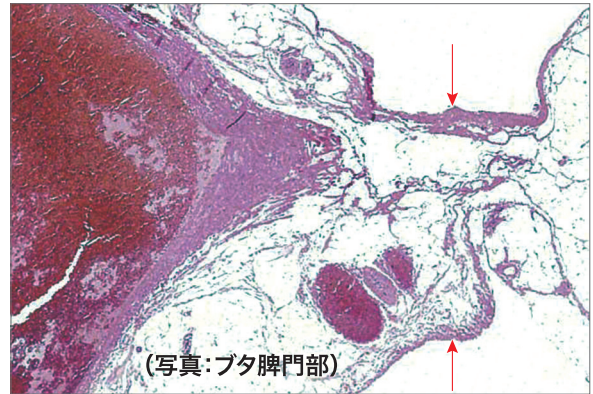


(写真:ブタ脾門部)

血管、内膜同士が癒合、血管周囲脂肪組織や結合組織も熱凝固されている。ブタ血管径5mmによる破裂試験では750mmHg以上の耐圧があることを確認しています。

BICEP SERIES

3種類のラインナップを持ち、曲がりの把持部と耐熱強度を高めた2層のセラミックWコート、電極間の間隙を確保するスペーサー構造を持つバイポーラクランプです。バイセップシリーズはリユース製品であり、オートクレーブ滅菌対応型です。

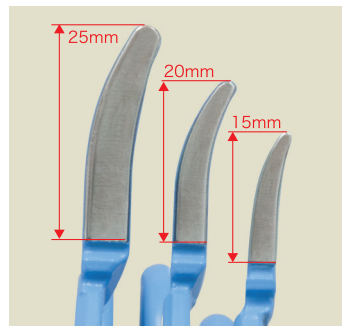

スペーサー
電極間の間隙を確保
セラミックWコート
2層の耐熱化コート

仕様

コード番号	JANコード	販売名	規格/型式	主な寸法、仕様	数量
0120705100	04562147793482	バイセップ	S-15	(全長)185mm (把持長)15mm (先端形状)カーブ	1本/包装
0120705200	04562147793499	バイセップ	M-20	(全長)220mm (把持長)20mm (先端形状)カーブ	1本/包装
0120705300	04562147793505	バイセップ	L-15	(全長)230mm (把持長)25mm (先端形状)カーブ	1本/包装
0120800500	04562147793512	バイセップコード	コード 3m	(全長)3m	1本/包装

販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社

■問い合わせ先: 本社商品企画 TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

製造販売業者

株式会社 **セムコ** 東京都足立区梅田4-16-8

注意

実際のお取り扱いの際には添付文書及び取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●バイセップ: 医療機器認証番号: 223AGBZX00126000/バイセップコード: 医療機器届出番号: 13B2X0035BC0002

●2017/11/1000 ●不許複製 ●B-45 ●GR-1 ●BO-00150-04 www.mera.co.jp/