

「ちょっと」も目を離せない、アラーム監視のお助けツール

◆使用上の注意◆ 本製品は、監視対象機器の事前に登録したアラーム表示を検知してスマートフォンに通知するものです。監視対象機器のアラーム動作との連動を保証する機器ではありません。


アラーム発生をスマホに通知 アラーム検知之助[®]



アラームの発生を
スマートフォンに通知



いつでもどこでも
カンタン確認

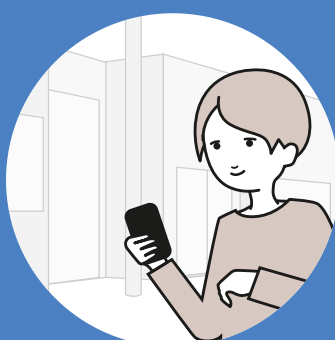

見逃さない
騒がしい場所でも安心



詳しい機能説明は裏面をご確認ください ▶

アラーム監視のお悩みに

ゆっくりお風呂に浸かりたいけど、目を離せないな ...

もっと テレビや音楽を安心して楽しみたいな ...


ちょっとした外出も心配 ... 一瞬でも誰かが見ていてくれば ...

洗濯物を干している間に何かあったらどうしよう ...



ワイヤレスアラーム検知モニター


後付設置で安心監視

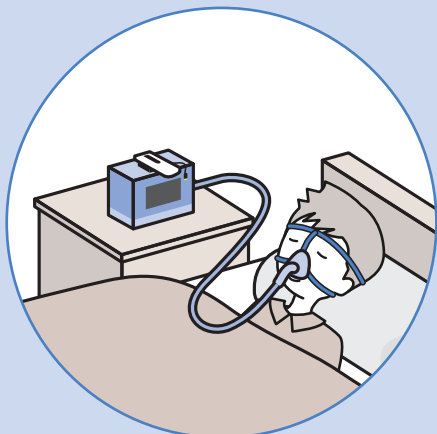

- ・監視対象機器に本機を後付けして、アラーム発生時の LED の点灯・点滅を検知します。
- ・検知したアラームと検知したときの画像を、スマートフォンに通知。
- ・監視対象機器から離れていても、騒がしい場所においても、アラームの発生検知をスマートフォンで確認可能です。

アラーム監視が必要な機器に

ペタッと簡単貼り付け

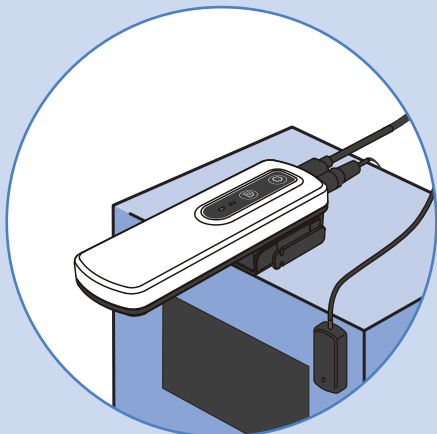

- ・機器の操作や外観の邪魔をせず、ペタッと簡単貼り付けができます。
- ・LED にセンサーを向けて、電源ケーブルを接続するだけで設置は完了。スマートフォンで設定して、監視はスタートします。
- ・アラーム発生時に点灯、点滅する LED や回転灯をセンサーが感知し、Wi-Fi を経由してクラウドサーバに通知します。アラーム発生はスマートフォンに直ちに通知されます。
- ・発生したアラーム検知履歴はスマートフォンからチェックできます。
- ・アラームの発生検知は、メール、LINE 等の SNS アプリに通知できます。

※ 本製品の無線 LAN (Wi-Fi) 機能は 2.4GHz 帯のみに対応しています。

アラーム発生をスマホに通知 **アラーム検知之助**®

販売元

泉工医科工業株式会社

〒113-0034
東京都文京区湯島 3-19-11
湯島ファーストビル 5F
TEL : 03-4283-1005

購入窓口



<https://www.mera.co.jp/contact/>

開発元

株式会社リサシステム

〒194-0215
東京都町田市小山ヶ丘 2-2-5-8
まちだテクノパークセンタービル 3F
Mail: support@kenchinosuke.com

詳しい情報は
こちら



<https://kenchinosuke.com/>