


corart BP sensorballoon P2

7Fr Short

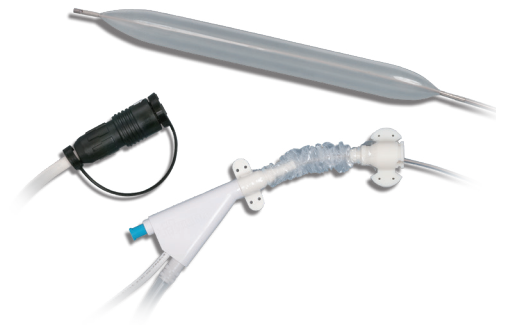


日本人向けのショートバルーン長

- 腎動脈の虚血リスクと腹部石灰化病変への接触可能性を低減しバルーンラプチャの発生抑制を期待


サイズ	適応身長を目安	バルーン長
28mL	140~160cm	170mm (-30mm)
36mL	155cm~	210mm (-40mm)

()内の数字はP2 7Fr通常バルーンとの比較

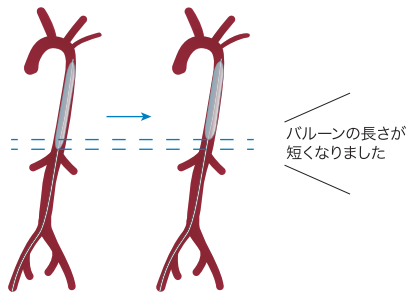


キレの良いシースを採用

- 強度向上と穿刺抵抗の軽減を図りました
- ダイレータは特殊加工を施し、繊細な先端テーパ形状を実現し、ガイドワイヤーへの更なる追従性と穿刺時の血管後壁へのダメージ軽減を追及

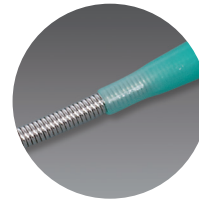


ダイレータ先端部

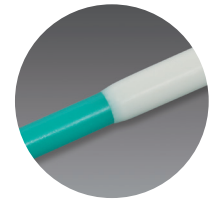

シーシ・ダイレータ一体化部

仕様、構成

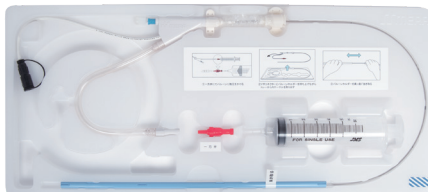

●バルーントレー



●イントロデューサーキット



●センサーケーブル



●駆動ホース

カテーテルサイズ	7Fr	
バルーン容量	28mL	36mL
ルーメン	ダブル	
カテーテル長さ	690mm	
カテーテル材質	ポリウレタン	
バルーン膜外径	16mm	
バルーン膜全長	170mm	210mm
バルーン膜材質	ポリウレタン	
ガイドワイヤー(バルーン用)	0.021inch 150cm J型 マンドレルタイプ	
ガイドワイヤー(シーシ用)	0.035inch 45cm J型 スプリングタイプ	
シーシ径	7Fr	
シーシ長	11cm	
ダイレータ径	7Fr	

コード番号	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	承認番号
0212021500	4544753020541	コラートBP センサーバルーン P2	P2 7Fr 28ml ショート(バルーンキット、挿入キット)	1組/箱	21400BZZ00104000
0212021600	4544753020558	コラートBP センサーバルーン P2	P2 7Fr 36ml ショート(バルーンキット、挿入キット)	1組/箱	

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社 <https://www.mera.co.jp/>

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

注意 ご使用前に必ず電子添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。
●2024/10月/2000 ●不許複製 ●GR-1 ●D-14 ●BH-0243-04

お問い合わせ

